

Problemas e soluções

- 1 - Se o visor digital não ligar assim que o usuário subir no aparelho, verifique se o Analisador de Composição Corporal Digital está com pilhas e se estão encaixadas corretamente.
- 2 - Caso o problema persista, troque as pilhas por novas unidades.
- 3 - Se o Analisador de Composição Corporal Digital não conecta com seu dispositivo móvel, verifique se o Bluetooth® do seu celular ou tablet está ativado.
- 4 - Se o ícone do Bluetooth® no não aparecer no visor do Analisador de Composição Corporal Digital durante o uso, desça e suba novamente.
- 5 - Para trocar de Kilogramas (Kg) para Libras (Lb), basta pressionar o interruptor na extremidade oposta acima do compartimento das pilhas.
- 6 - Seus dados serão armazenados nos servidores do aplicativo. Em caso de perda ou troca de smartphone ou talbet, seus dados serão recuperados rapidamente através do seu login e senha.

Características do produto

Material: Display em LED branco, vidro com 6mm de espessura e tecnologia ITO Glass (sensores a base de Óxido de Índio e Estanho).

Condições ideais de uso: temperatura de operação entre 0 a 50°C e de armazenagem entre -10° a 60°C.

Dimensões e peso do produto: plataforma em vidro temperado – 30 cm X 30 cm | Peso do produto: 0,7kg.

Capacidade: pesagem máxima 180kg ou 400lb | Altura máxima: 2,55m | Idade máxima: 120 anos.

Intervalo de medições

Intervalos de pesagem	100g ou 0,1lb
Gordura corporal	0,1%
Água corporal	0,1%
Massa muscular	0,1%
Massa óssea	0,1%
Gordura visceral	1,0%
IMC	0,1%
Metabolismo basal	1Kcal

Embalagem

Peso da embalagem com o produto: 1,5Kg;

Conteúdo da embalagem: 1 Analisador de Composição Corporal Digital, 1 bolsa em neoprene e alças de transporte, 3 pilhas alcalinas AAA (palito) e este manual.

Dimensões da embalagem: 36x36x6cm

GARANTIA DO PRODUTO: Este produto foi desenvolvido dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, sendo garantido durante 12 MESES para defeitos de fabricação, a partir da data de sua aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.

sac@meuskinup.com.br / www.meuskinup.com.br



Analisador de Composição Corporal Digital

Exclusivo sensor ITO Glass para análises precisas de biometria corporal através da tecnologia de bioimpedância.

Resultado em 3 segundos

Leitura via Bluetooth®

Exclusivo aplicativo Scale Up em português



Importador/Distribuidor
Chazak Ve Ematz Com. Imp. Exp. Ltda.
CNPJ 09.609.048/0001-76



SKN1801

Parabéns! Você tem em mãos o Analisador de Composição Corporal Digital da SkinUp Beauty Devices.

A mais avançada tecnologia está ao seu lado através de um produto portátil, com design clean e de máxima precisão para realizar a análise de até 16 medições de bioimpedância.

Conheça as principais funções do Analisador de Composição Corporal Digital:

1. Medição de peso corporal total em quilogramas (Kg) ou libras (lb);
2. Medição do peso de gorduras, músculos, esqueleto e de água no corpo separadamente.
3. Medição do índice de massa corporal (IMC);
4. Análise de gordura corporal;
5. Análise de gordura visceral;
6. Medição de calorias;
7. Medição de massa muscular;
8. Análise estrutural óssea;
9. Medição do nível de água corporal.
10. Metabolismo basal.


9 razões para você utilizar o Analisador de Composição Corporal Digital:

- 1 - Obtenha diagnósticos completos e precisos em apenas 3 segundos.
- 2 - Faça uma verdadeira revolução tecnológica na área da saúde. Este aparelho, leve e portátil, utiliza o ITO Glass e dispensa o uso de condutores de metais, além de possuir sensores de alta precisão e velocidade.
- 3 - Acompanhe por dia, semana ou mês a evolução física, por gráficos e relatórios personalizados, para diversos usuários, de pessoas sedentárias a atletas profissionais.
- 4 - Crie programas de saúde específicos para alcançar diferentes objetivos em todas as idades.
- 5 - Elimine o tempo de digitação dos resultados da bioimpedância. O Analisador de Composição Corporal Digital é sem fios e sem botões. As análises são enviadas via Bluetooth® (4.0 BLE de baixo consumo de energia) para aplicativo exclusivo Scale Up.
- 6 - Com o aplicativo, cada usuário passa a ter um perfil exclusivo em seu próprio smartphone, pode acessar e compartilhar suas informações de saúde corporal a qualquer momento e de qualquer lugar.
- 7 - Transmita uma imagem profissional e moderna do seu negócio. Com o Analisador de Composição Corporal Digital você fideliza e melhora a comunicação com o seu público e com a comunidade ligada à saúde e estética corporal.
- 8 - O Analisador de Composição Corporal Digital da SkinUp Beauty Devices vem com uma exclusiva bolsa em neopreme para assegurar maior proteção ao equipamento e alças de transporte.
- 9 - É um equipamento de fácil limpeza e manutenção barata.

Instruções de uso

É bem simples e prático utilizar o Analisador de Composição Corporal Digital SKN 1801. Em poucos segundos as medições são realizadas e enviadas para o aplicativo exclusivo Scale Up. Veja como prosseguir:

- 1 - Remova o produto da caixa. Na parte inferior traseira do Analisador de Composição Corporal Digital está o compartimento das pilhas, abra-o. Verifique e localize na embalagem as 3 pilhas AAA que acompanham o produto. Encaixe-as corretamente no compartimento, prestando atenção ao sentido dos polos (+ e -) indicados.

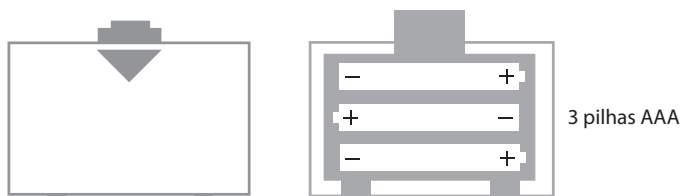


- 2 - Baixe o aplicativo Scale Up e crie uma conta com login e senha. Na sequência cadastre os dados solicitados: nome, sexo, peso, altura e data de nascimento.

Aplicativo Scale Up



- 3 - Antes de subir no Analisador de Composição Corporal Digital, ative o Bluetooth® e sua conexão com a internet no smartphone ou tablet.

- 4 - Posicione o Analisador de Composição Corporal Digital com o logotipo da SkinUp Beauty Devices, localizado no círculo metálico central, na posição correta (cuide para não estar de ponta-cabeça). O produto deve sempre ser utilizado no chão firme e sem inclinação.

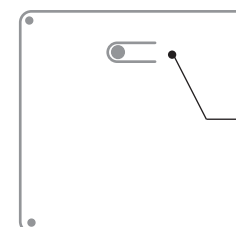

Botão de seleção de Kilos ou Libras

- 5 - O usuário deve subir no Analisador de Composição Corporal Digital sem calçados e sem meias, com os pés descalços e com o mínimo de peças de roupa possível. De preferência sem objetos metálicos junto ao corpo.

- 6 - Em até 3 segundos, o visor do aparelho acenderá, indicando o peso da pessoa e um ícone do Bluetooth®. Neste momento, o aplicativo Scale Up já terá recebido todas as medições.

- 7 - Após o aplicativo indicar o recebimento das medições, o usuário poderá validar a leitura ou descartá-la, seguindo as instruções na tela do aplicativo. Na sequência, basta descer do Analisador de Composição Corporal Digital. Não é preciso desligar o aparelho, pois o mesmo desligará automaticamente após alguns segundos.

- 8 - Caso deseje somente verificar o peso, não é preciso ativar o aplicativo e o Bluetooth® do smartphone.

Compatibilidade

O aplicativo Scale Up é gratuito e compatível com smartphones Android 4.3 ou superior e iOS iPhone 4s ou superior. Disponível para download nas respectivas lojas de aplicativos ou em nosso site www.meuskinup.com.br

Cuidados Básicos

Utilize apenas um pano umedecido em água para limpar o aparelho. **Jamais utilize produto químico ou solvente na superfície de vidro, isto danificará permanentemente seu analisador.**

Higienize o aparelho após cada utilização.

Não deixe o Analisador de Composição Corporal Digital em contato direto com a luz solar. Evite posicionar o aparelho ao lado de janelas.

Caso precise guardar o aparelho em outro ambiente, evite locais abafados, muito úmidos e com variações constantes de temperatura, pois isso pode danificar a capacidade de medição.

Se não for utilizar seu Analisador de Composição Corporal Digital por um período superior a 20 dias, remova as pilhas do compartimento traseiro para evitar vazamentos.

Utilize somente pilhas alcalinas AAA (palito) em seu Analisador de Composição Corporal Digital.

ATENÇÃO! Em hipótese alguma tente abrir o Analisador de Composição Corporal Digital.