



Como está a minha pele hoje?

Skin Analyser Digital facial e corporal

Leitor de umidade, oleosidade e elasticidade da pele com tecnologia de análise de impedância bioelétrica.

Nova Versão 3.0 com *Track Back*
(Versão atualizada para uma leitura mais precisa)



SKN1501

Parabéns por adquirir o Skin Analyser Digital, da SkinUp Beauty Devices.

Este instrumento utiliza a mais moderna tecnologia para a leitura dos níveis de umidade, oleosidade e elasticidade da sua pele por meio de impedância bioelétrica. Trata-se de um equipamento rápido, preciso e fácil de usar.

O Skin Analyser Digital possui 4 funções simultâneas:

1. Medição da umidade da pele (em percentuais);
2. Medição da oleosidade da pele (em percentuais);
3. Indicação da qualidade da elasticidade da pele (ícones sinalizam se a pele está BOA ou RUIM em relação à elasticidade);
4. Indicação do equilíbrio da pele e a relação entre sua umidade e oleosidade (por meio das cores verde, amarela ou vermelha do visor). Quanto mais equilibrada, melhor será a aparência da pele.

8 razões para você utilizar o Skin Analyser Digital

- 1- A medicina moderna nos ensina que a água é a matéria básica da nossa pele. O equilíbrio correto entre a água e o óleo são essenciais para uma pele jovem, bonita e saudável.
- 2- Para manter o equilíbrio da pele é preciso garantir que a umidade e a oleosidade estejam sob controle. O Skin Analyser SKN1501 serve para ajudar no controle da saúde da pele, por meio de um monitor preciso, portátil e muito fácil de usar.
- 3- O Skin Analyser SKN1501 pode ser usado no rosto e em todas as regiões do corpo.
- 4- O Skin Analyser SKN1501 é portátil, à base de pilhas e pode ser usado várias vezes ao dia. Por exemplo, meça os níveis de óleo e água da sua pele antes e depois de um procedimento estético para medir sua eficácia e conhecer os resultados em tempo real.
- 5- Este é um equipamento útil também para diabéticos ou pessoas com sintomas de ressecamento da pele que requerem cuidados especiais, como dermatites e psoríase.
- 6- O acompanhamento da saúde da sua pele permitirá o alívio dos sintomas da pele seca por meio de um tratamento adequado. Também é indicado para pessoas que utilizam diuréticos e que têm hipo e hipertireoidismo.


Instruções de uso

O Skin Analyser SKN1501 é um instrumento de fácil operação e poderosa performance. Possui um display intuitivo e é um equipamento de baixa manutenção e fácil higienização.

1- Remova a tampa traseira do compartimento das pilhas e insira as 2 pilhas nas posições indicadas. Feche a tampa.

2- Remova a proteção da cabeça de leitura e limpe-a, suavemente, com um pano limpo e seco ou com algodão.

3- Pressione o botão  para ligar o instrumento. A luz verde do display irá acender, ao som de um toque. Os números do display ficarão piscando por poucos segundos.

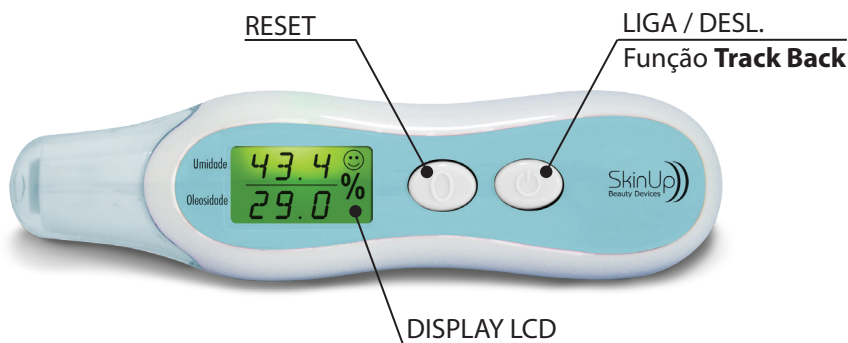

4- Após 2 toques seguidos e a paralização do display, o instrumento estará pronto para uso.

5- Imediatamente encoste o sensor que está na cabeça de leitura sobre a pele (na região a ser medida) e pressione suavemente.



6- Após um toque, duas leituras aparecerão no visor. A leitura superior é o percentual de umidade da pele e a leitura inferior é o percentual de oleosidade. A luz de fundo (que pode

ser verde, amarela ou vermelha) indica a relação de equilíbrio entre a umidade e a oleosidade. O rosto no canto inferior e superior direito do display indica a qualidade da elasticidade da pele.

7- Para fazer nova leitura antes de desligar o instrumento, pressione o botão  e siga as instruções do item 5 em diante.

8- Para desligar o instrumento, pressione a botão  ou aguarde que ele desligará automaticamente após alguns segundos de inatividade.

Função track Back – Você poderá retornar e ver as 10 ultimas análises realizadas pressionando o botão ligar por 5 segundos, aparecerá a ultima leitura (leitura 1) depois pressione rapidamente o mesmo botão para ver a leitura 2, pressione mais uma vez para ver a leitura 3 e assim por diante até a leitura 10.

ATENÇÃO! Em hipótese alguma molhe o Skin Analyser SKN1501. Isso poderá danificar seu instrumento permanentemente.

Como encontrar o melhor produto para cada indivíduo?

Descubra o melhor produto para cada indivíduo por meio do teste de biocompatibilidade de ativos, de forma simples e rápida, encantando ainda mais seus clientes com melhores resultados em seus Protocolos.

Biocompatibilidade de ativos?

Aumente a performance das suas propostas de tratamentos, indicando o melhor produto para cada indivíduo, por meio da técnica de “Biocompatibilidade”.

Como assim?

Sabemos que cada pessoa possui suas características biodinâmicas individuais e que cada marca de produto, produto ou ativo possuem performances diferentes em cada tipo de pele, Correto? Sim! Correto!

Por que?

Cada indivíduo possui uma biocompatibilidade diferente a cada ativo e base dos produtos.

Vamos lá, aos cinco passos que vão revolucionar seus atendimentos!


1- Marque quatro “lotes” da parte inferior do antebraço da cliente, conforme desenho ao lado;

2- Meça os valores iniciais de hidratação e oleosidade em cada lote e anote os resultados.

3- Aplique quatro produtos diferentes (um em cada lote) que você considera potências produtos para o protocolo.

4- Aguarde de 5 a 10 minutos até total absorção dos produtos.

5- Tomar novas medições em 5 minutos após a aplicação.

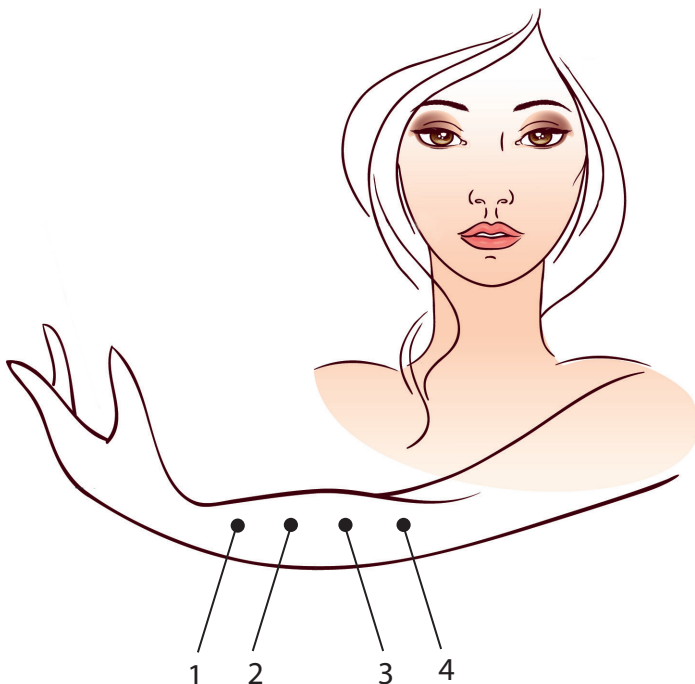


Observe que interessante!

Em uma das respostas dos 4 resultados, um deles teve melhor performance de hidratação e menor grau de oleosidade simultaneamente. Parabéns! Você encontrou o produto com a maior biocompatibilidade com esse indivíduo! O que lhe trará melhores resultados por meio da assertividade da sua recomendação do produto correto para cada cliente, afinal atendimento personalizado agrega valor e a diferencia no mercado.

ATENÇÃO: leituras diferentes no mesmo local.

A tecnologia de bioimpedância analisa os fluidos encontrados na pele no instante da análise. Ao pressionar o equipamento sobre a pele esta pressão movimentará os fluidos (água e óleo) existentes no local, fazendo o resultado variar de acordo com a pressão exercida. Mantenha uma pressão suave e tente, com a prática, fazer a mesma pressão sempre ao realizar a análise para obter resultados precisos.

O Skin Analyser Digital possui 3 funções simultâneas:

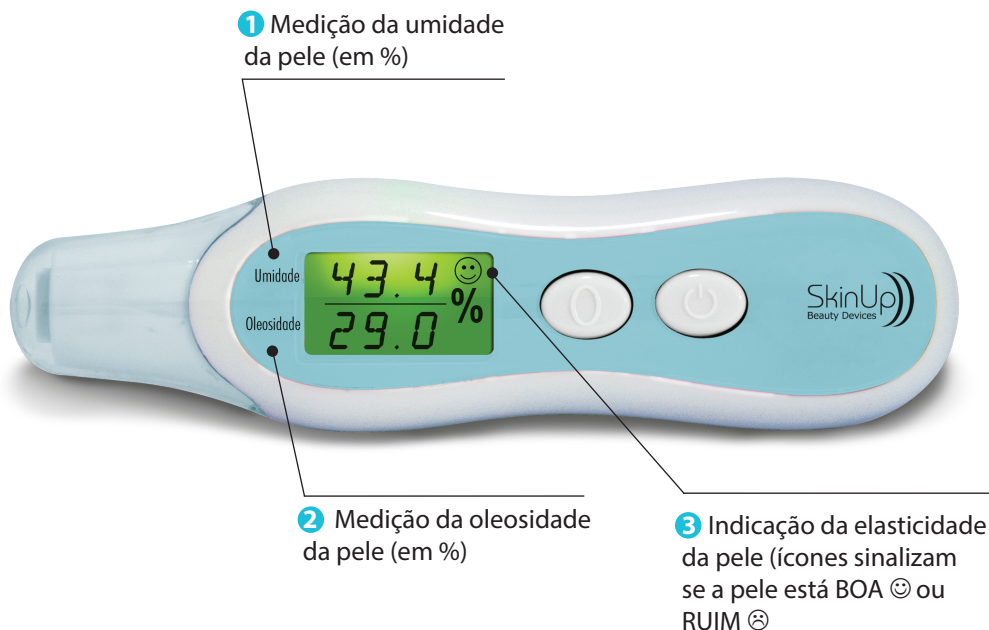

A maioria das peles está em desequilíbrio entre água e óleo, componentes principais para uma pele saudável e bonita.

Nosso equipamento chegou para oferecer o conhecimento destas informações, para manutenção e acompanhamento dos resultados alcançados.

O que é impedância bioelétrica?

Impedância bioelétrica ou “bioimpedância” é um método não-invasivo, rápido e seguro de análise dos compartimentos corporais, especialmente água e gordura. Seu princípio é a passagem de corrente elétrica de baixíssima intensidade (500 a 800 μA) e de alta frequência (50 kHz) por um condutor, no caso o corpo humano. A impedância é justamente a medida da resistência desse condutor à passagem da corrente, desta maneira obtendo-se os resultados da análise.

A iluminação do display indica cada condição da pele

Luz verde não significa que a pele está em total equilíbrio, possui um desequilíbrio leve ou precisa de um ajuste pequeno para voltar a seu estado ideal nos níveis de umidade, oleosidade e elasticidade, recomenda-se uso de produtos para correção dos problemas e acompanhamento das leituras para conhecer os resultados alcançados.



Luz vermelha significa um alerta de que o desequilíbrio da pele está acentuado e necessita de atenção urgente para a correção dos problemas, recomenda-se uso de produtos para correção dos problemas e acompanhamento das leituras para conhecer os resultados alcançados.



Luz amarela significa que a pele está muito equilibrada e saudável, não necessita de correções ou tomadas de decisão urgentes sobre a saúde da pele, recomenda-se uso de produtos para manutenção e acompanhamento das leituras para conhecer os resultados alcançados.




Tipos de pele

Níveis de Umidade e Oleosidade

■ Intervalo do percentual de água

■ Intervalo do percentual de óleo

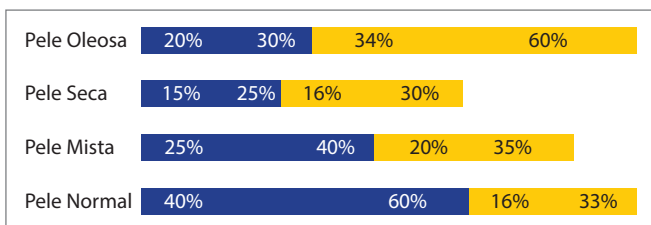

Pele normal

Menos frequente dentre todos os tipos de pele, a pele normal tem textura saudável e aveludada. Além disso, possui elasticidade ideal e produz gordura natural em quantidade adequada. Normalmente, a pele normal apresenta um aspecto rosado, com poros pequenos e pouco visíveis, e é pouco propensa ao desenvolvimento de espinhas e manchas.

(fonte: Sociedade Brasileira de Dermatologia)

Níveis de Umidade e Oleosidade

■ Intervalo do percentual de água

■ Intervalo do percentual de óleo



Parâmetros

A pele normal é a pele que possui equilíbrio ideal entre água, óleo e elasticidade. Reflete a pre-disposição genética os hábitos saudáveis e os cuidados com a pele.

Recomendações

Manutenção dos hábitos saudáveis e tratamento da pele. Consulte seu dermatologista ou sua esteticista para obter os melhores resultados.

Acompanhamento

A análise deve ser repetida periodicamente para o acompanhamento dos resultados dos níveis de umidade e oleosidade da pele.

Pele seca


A perda de água em excesso caracteriza a pele seca, que normalmente tem poros poucos visíveis, pouca luminosidade e é mais propensa a descamação e vermelhidão. A pele seca também pode apresentar maior tendência ao aparecimento de pequenas rugas e fissuras. A pele seca pode ser causada por fatores genéticos e hormonais, e também por condições ambientais, como o tempo frio ou seco, o vento e a radiação ultravioleta. Banhos demorados e com água quente podem provocar ou contribuir para o ressecamento da pele.

(fonte: Sociedade Brasileira de Dermatologia)

Níveis de Umidade e Oleosidade

■ Intervalo do percentual de água

■ Intervalo do percentual de óleo

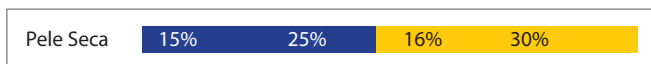

Parâmetros

A pele seca apresenta o nível de água abaixo do mínimo desejado e índices de oleosidade não tão elevados.

Recomendações

Ingerir mais água e aumentar a hidratação da pele com produtos para pele seca. Consulte seu dermatologista ou sua esteticista para obter os melhores resultados.

Acompanhamento

A análise deve ser repetida periodicamente para o acompanhamento dos resultados dos níveis de umidade e oleosidade da pele.

Pele oleosa


A pele oleosa tem aspecto mais brilhante, úmido e espesso, por causa da produção de sebo maior do que o normal. Além da herança genética, contribuem para a oleosidade da pele fatores como alterações hormonais, excesso de sol, estresse e uma dieta rica em alimentos com alto teor de gordura. A pele oleosa apresenta os poros dilatados, e maior tendência à formação de acne, cravos e espinhas.

(fonte: Sociedade Brasileira de Dermatologia)

Níveis de Umidade e Oleosidade

■ Intervalo do percentual de água

■ Intervalo do percentual de óleo

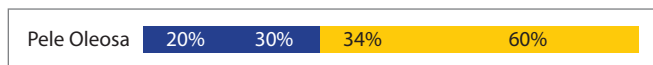

Parâmetros

Nível de óleo muito acima do normal, com tendência de nível de água baixo.

Recomendações

Reduza o consumo de frituras e gorduras e utilize produtos para pele oleosa. Consulte seu dermatologista ou sua esteticista para obter os melhores resultados.

Acompanhamento

A análise deve ser repetida periodicamente para o acompanhamento dos resultados dos níveis de umidade e oleosidade da pele.

Pele Mista

É o tipo de pele mais frequente, e apresenta aspecto oleoso e poros dilatados na “zona T” (testa, nariz e queixo) e seco nas bochechas e extremidades. A pele mista tem espessura mais fina, com tendência à descamação e ao surgimento de rugas finas e precoces.

(Fonte: Sociedade Brasileira de Dermatologia)

Níveis de Umidade e Oleosidade

■ Intervalo do percentual de água

■ Intervalo do percentual de óleo



Parâmetros

A pele mista apresenta níveis diferentes de água e óleo em regiões diferentes da pele.

Recomendações

Consulte seu dermatologista ou sua esteticista para obter os melhores resultados.


Acompanhamento

A análise deve ser repetida periodicamente para o acompanhamento dos resultados dos níveis de umidade e oleosidade da pele.


Tipos de pele




Pele Normal

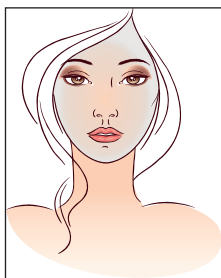

Pele Seca

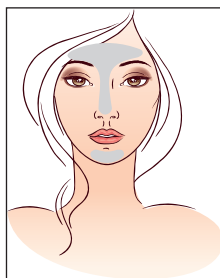


Pele Mista

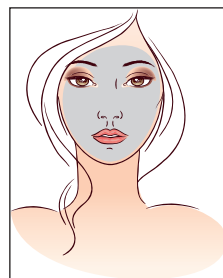

Pele Oleosa

Níveis ideais para a pele

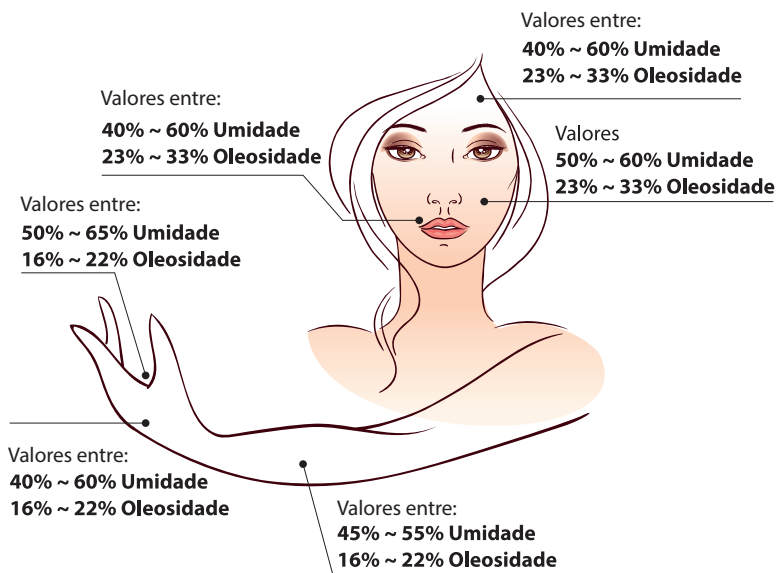



SkinUp
Beauty Devices

Visite nosso site e assista nossos vídeos,
esclareça suas dúvidas em
www.meuskinup.com.br

Entre em contato conosco:
sac@meuskinup.com.br

Siga-nos



Representante/Revendedor

